


Beinmassagegerät

Art.-Nr. 144 782 034

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

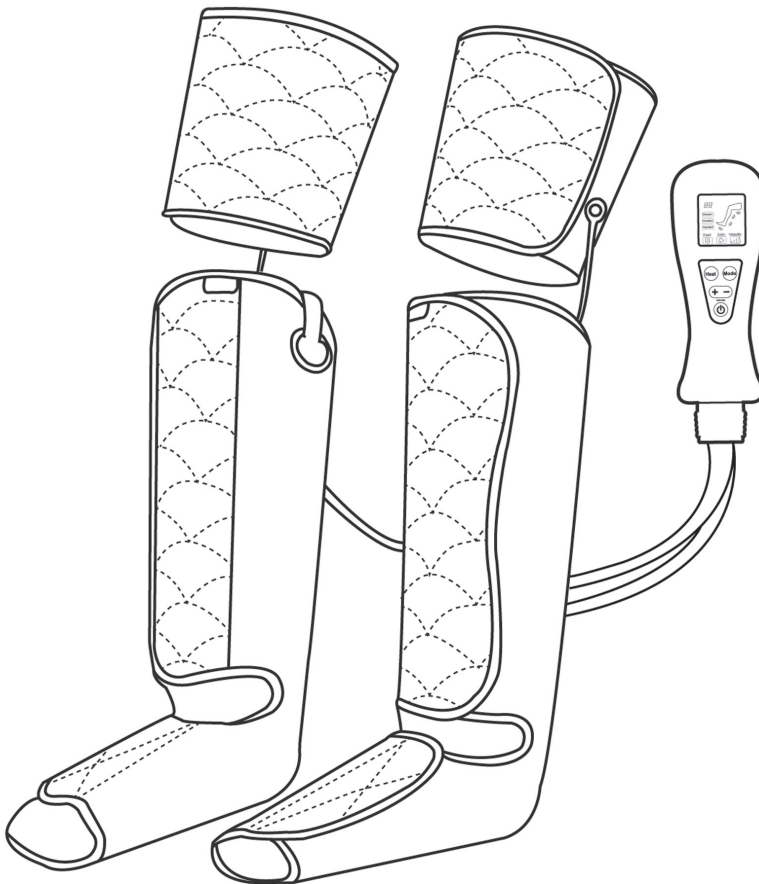

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um Stromschlag, Feuer und/oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:

- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur Bauteile, Zubehör und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Falls der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sein sollten, bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel / den Netzstecker fern von Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät nach einer maximalen Betriebszeit von 20 Minuten stets ausreichend abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten oder sollten Sie sich bei der Anwendung unwohl fühlen oder Schmerzen verspüren, beenden Sie den Gebrauch sofort.
- Wenn die Temperatur zu hoch ist oder das Produkt einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugt, beenden Sie bitte sofort den Gebrauch, schalten das Gerät aus und ziehen den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel ausschließlich am Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen (nicht am Netzkabel ziehen). Wenden Sie beim Ziehen keine Gewalt an.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, sollten die Heizfunktion mit Vorsicht verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen


1. Wenn eine der folgenden Bedingungen auf Sie zutreffen, konsultieren Sie bitte vor dem Gebrauch einen Arzt:
 - Schwangere Frauen, Kinder oder ältere Menschen.
 - Personen mit Hautinfektionen oder Rötungen und Verbrennungen auf der Haut haben.
 - Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein implantiertes medizinisches Gerät verwenden.

- Patienten mit Herzkrankheiten oder bösartigen Tumoren, usw.
 - Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden oder Beschwerden haben.
 - Menschen, die an Osteoporose leiden.
 - Personen mit hohem oder unnormalem Blutdruck
2. Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Das Produkt eignet sich ausschließlich für den persönlichen und nicht-professionellen Gebrauch.


Reinigung und Wartung

- Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen oder warten.
- Bitte wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzadapter oder andere Teile dieses Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzol oder Verdünnungsmitteln.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie es nicht benutzen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung aus, da sonst die Farbe verblasen oder das Produkt beschädigt werden kann.

Produktübersicht

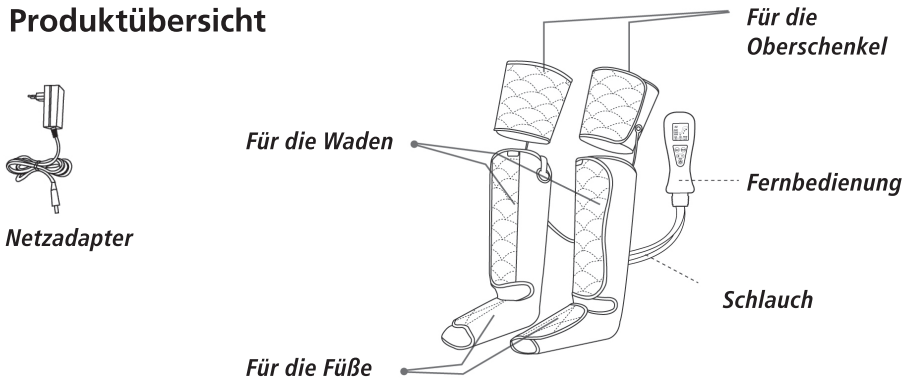


Die Fernbedienung

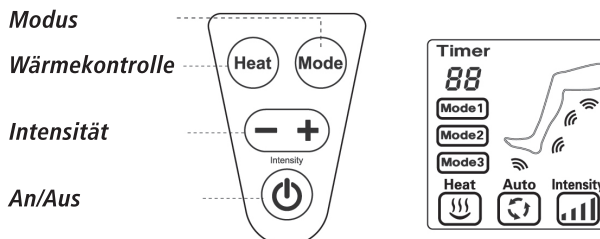

Bedienung

Schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz und das Gleichstromkabel am Massagegerät an. Das Gerät befindet sich dann im Stand-by-Modus.





Tastenfunktionen



 Drücken Sie diese Taste im Stand-by-Modus, um das Gerät einzuschalten. LCD-Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung sind dann eingeschaltet. Standardmäßig sind das automatische Luftkompressionsprogramm, die Intensitätsstufe 2 und die Heizstufe 2 eingestellt. Der Countdown beginnt (Standard-Timer: 20 Minuten). Der LCD-Bildschirm zeigt den aktuellen Betriebsmodus, die Intensität und die verbleibende Betriebszeit an. Wenn die Taste bei eingeschaltetem Gerät oder nach 20 Minuten Betriebszeit gedrückt wird, werden alle Massagevorgänge gestoppt und das Gerät wechselt in den Stand-by-Modus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus, wenn länger als 15 Sekunden keine Taste betätigt wird. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um diese einzuschalten, dann sind alle Funktionstasten funktionsbereit.



 Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät in Betrieb ist, um zum Luftkompressionsmassageprogramm zu wechseln. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wechselt der Massagemodus entsprechend. Die Massageintensität wird automatisch auf Stufe 2 eingestellt. Der LCD-Bildschirm zeigt die Massagearten und die Intensität an.



Die Umschaltreihenfolge ist wie folgt: Auto > Modus 1 > Modus 2 > Modus 3 > Auto.

- Auto: Luftdruckmassage der Füße, dann der Waden und schließlich der Oberschenkel.
- Modus 1: Luftkompressionsmassage nur für die Füße.
- Modus 2: Luftkompressionsmassage nur für die Waden.
- Modus 3: Luftkompressionsmassage nur für die Oberschenkel.

 Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät in Betrieb ist, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird die Heizfunktion entsprechend ein- oder ausgeschaltet. Die entsprechenden LCD-Symbole zeigen den Heizstatus an: Wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol . Das Symbol  blinkt bei Heizintensitätsstufe 1 und  leuchtet konstant bei Heizintensitätsstufe 2.

 Drücken Sie diese Taste, wenn sich das Gerät im Luftkompressionsmassage-Modus befindet. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, schaltet die Luftkompressionsintensität auf eine höhere Stufe, bis die Intensität Stufe 4 erreicht. Das Symbol  zeigt Stufe 4 an.

 Drücken Sie diese Taste, wenn sich das Gerät im Luftkompressionsmassage-Modus befindet, um die Massageintensität zu verringern. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, schaltet die Luftkompressionsintensität auf eine niedrigere Stufe, bis die Intensität auf Stufe 1 sinkt. Das Symbol  zeigt Stufe 1 an.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird die verbleibende Betriebszeit  durch einen Countdown angezeigt.  zeigt den genauen Massageartikel an.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	1. Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen oder der Netzadapter ist lose oder fällt heraus, was zu einer schlechten Verbindung führt. 2. Der Betriebsschalter ist nicht eingeschaltet oder der Timer beendet.	1. Schließen Sie den Netzadapter korrekt an. Stecken Sie den Adapter sicher und vollständig in eine Netzsteckdose. 2. Schalten Sie das Gerät mit der An/Aus-Taste ein.
Heizfunktion funktioniert nicht.	Der Überhitzungsschutz schaltet die Heizfunktion automatisch ab, wenn die Betriebszeit zu lang ist.	Die Heizfunktion wird wieder aktiviert, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist.
Schwache Geräusche während des Betriebs.	Während des Betriebs gibt der Motor Geräusche von sich.	Dies ist ein normales Betriebsgeräusch des Motors.

Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Technische Daten


- Produktname: Bein-Massagegerät
- Produktmodell: HY-1130
- Betriebsspannung Netzadapter: 230 V \square 50 Hz
- Eingangsspannung Netzadapter: 12 V – 2 A
- Leistung: 24 W
- Betriebszeit: 20 Minuten

Lieferumfang

- 1 x Bein-Massagegerät
- 1 x Netzadapter
- 1 x Bedienungsanleitung

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

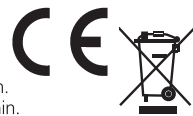

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: **Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

Deutschland **Telefon:** 0821/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)