

Luftmassagegerät

Art.-Nr. 6134630

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.



Bedienung

- Verwenden Sie die Manschetten nicht an beiden Armen oder beiden Beinen gleichzeitig.
- Legen Sie sämtliche Accessoires (wie z.B. Armbanduhren, Armbänder, Fußkettchen usw.) ab, wenn Sie die Manschetten benutzen.
- Legen Sie die Manschetten nicht in die Nähe von Hitze- oder Feuchtigkeitsquellen.
- Bitte tragen Sie unter der Manschette ein dünnes Hemd oder Strümpfe, da Schweiß oder Hauttalg die Betriebsleistung und Beständigkeit des Luftmassagegeräts beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Pumpe, um Luft in die Manschetten zu pumpen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie die Manschetten nicht angelegt haben.


Korrektes Anlegen der Manschetten




Tragerichtung



Verwendung an der Wade

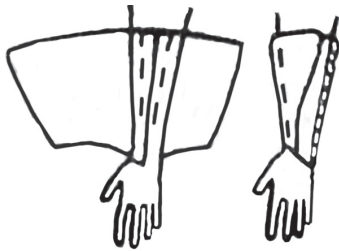

Verwendung am Unterarm

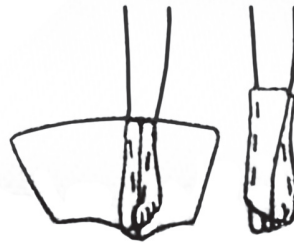

Verwendung am Fuß

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180/6 35 43 60 E-Mail: info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848/810 810 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662/939 0 939 E-Mail: kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)